

あなたをやさしくエスコートする...

**カワムラサイクル**

ストレッチャー

**KM-SR1**

# 取扱説明書



安全に関するご注意 1

1. 各部名称 2

2. 各部の使用方法 3

3. 仕様 4

4. 保証 5

このたびはカワムラサイクルのストレッチャーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。


ご使用になる前に必ずお読みください。また、お読みになった後は大切に保管してください。





株式会社 **カワムラサイクル**

## 安全に関するご注意    ご使用になる前に必ずお読みください。

### [表示マークの説明]

 **警告** この表示は「人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示は「人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

 **禁止** この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

以下の注意点以外であっても、無理な使用はおやめください。事故の原因になります。

### **禁止**

患者の搬送用以外には使用しないでください。  
保管は室内でおこなってください。

### **警告**

搬送時は、二人以上で行ってください。  
患者の乗せ替えをする時は、必ずブレーキを掛けて行ってください。  
ハンドル操作によって担架を上下させる時は必ずブレーキを掛けて行ってください。  
搬送する時は必ずサイドレールを立ててロックされていることを確認してから使用してください。  
サイドレールを移乗用の台および、起き上がりの手すりに利用しないでください。破損した場合、患者が落下し大変危険です。(サイドレールは搬送中の落下を防止する為のものです。)  
ストレッチャーから離れる時は必ずブレーキを掛けてください。また傾斜地には放置しないでください。  
段差や溝などを勢いつけて乗り越えようとすることは危険ですのでしないでください。  
担架の両端に腰掛けるとストレッチャーが転倒の恐れがあるのでしないでください。  
ストレッチャーの上には立ち上がらないでください。  
傾斜地や凹凸、段差のある場所でのご使用はストレッチャーが不安定な状態になり大変危険ですのでお使いにならないでください。  
火気に近付けないで下さい。  
勝手に改造・分解しないでください。強度や耐久性が劣化して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。(保証対象外)  
湿気の多いところや雨風の当たるところに放置しないでください。サビの原因になります。

## ⚠ 注意

ストレッチャーの各部を点検してから使用してください。

ブレーキがかかること


昇降用ハンドルを回し、スムーズに担架部が上下し、ガタつき、異音がないこと

サイドレールが確実に固定できること

キャスターの割れ、取付けにガタが出ていないこと

異常が見つかった場合は使用を中止し、販売店にて修理、点検をしていただきますようお願いいたします。

## 1. 各部名称

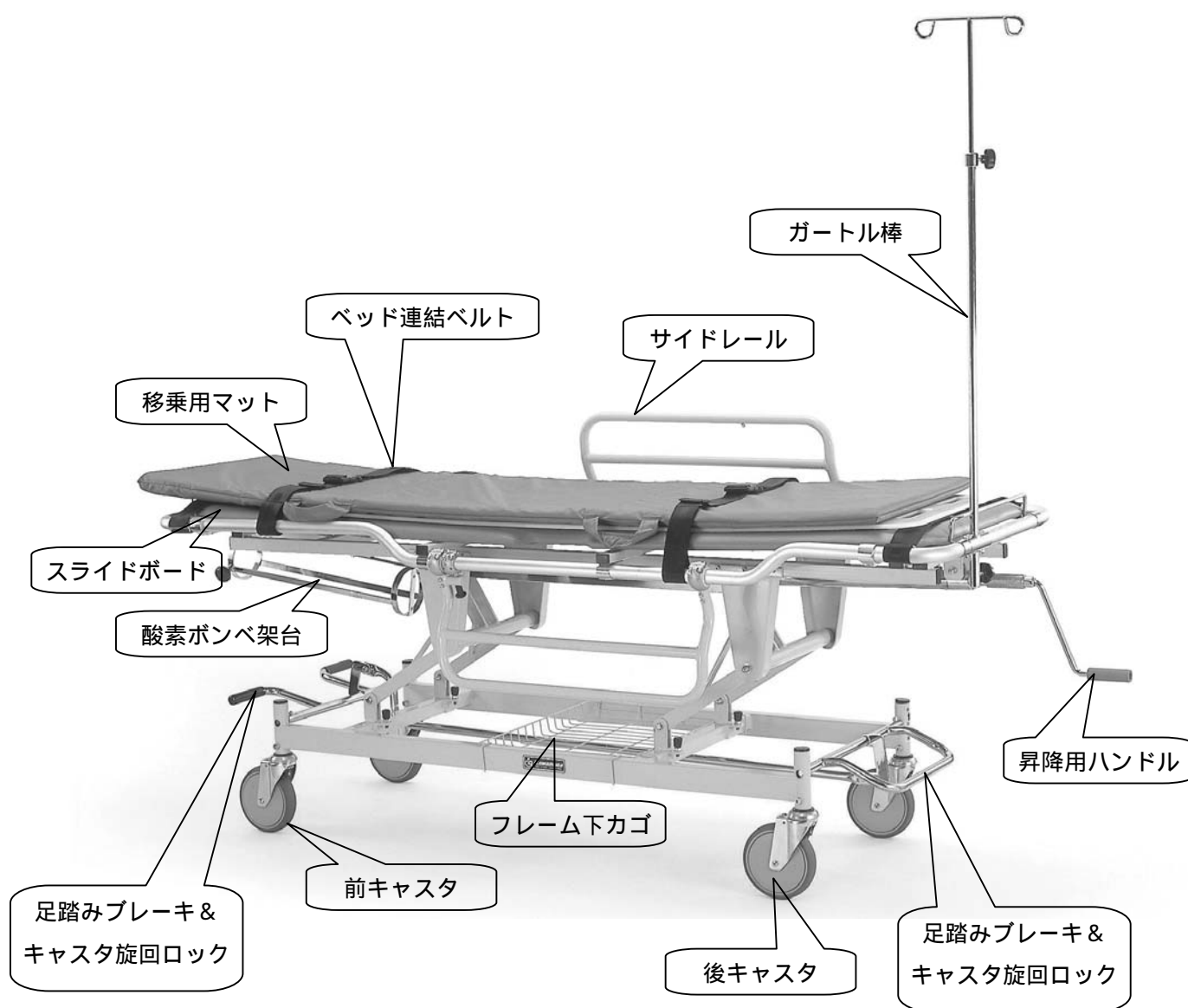

## 2.各部の使用手法


### <サイドレールの使用方法>

#### 上げるとき

サイドレールを持ち、ゆっくりと外側へ起こしてください。かちっと音がし、固定ピンが穴にはまっていることを確認してください。

#### 下げるとき

サイドレールに付いているノブを上へ引き上げながら外側へ開くように倒してください。

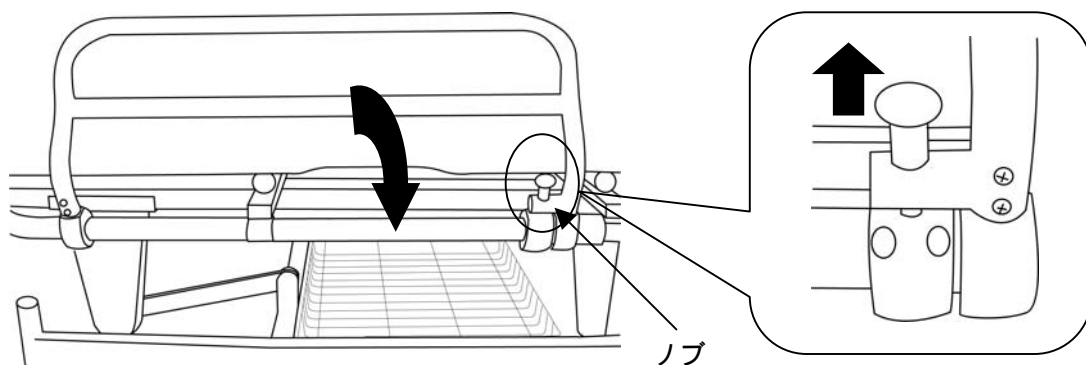

### ⚠ 注意


サイドレールを上げ下げされる際には、特に指をはさまないようご注意ください。サイドレールが固定されていることを確認した上でご使用ください。

### <昇降用ハンドルの使用方法>

- ・ ハンドルを時計回りに回転させると担架が上昇し、反時計回りに回転させると降下します。（最上部または最下部に達した時はハンドルが重くなりますのでそれ以上回すと故障の原因となりますので無理にまわさないでください。）
- ・ ハンドルは折りたたみ式となっています。ハンドル部中央の握り金具を手前に引きながら折りたたんでください。そのとき片手でグレーのプラスチック部を持って両手で操作してください。

### ⚠ 注意

指をはさまないよう握り金具は手前の方を握って操作してください。

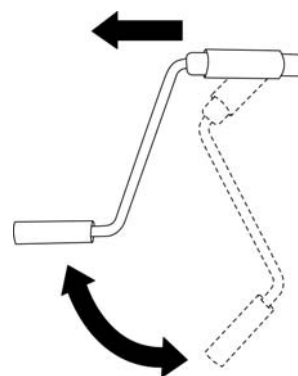

- ・ 担架部の昇降時以外はハンドル部をかならず折りたたんだ状態にしてください。
- ・ 使用する時はプラスチック部を持って手前に引くとハンドルが使用する時の位置に戻ります。

### ⚠ 注意

ハンドルを折りたたむ時に手・指を挟まないよう充分に注意してください。

### < ブレーキの使用方法 >

足踏みブレーキ部を下向きに踏むと、ブレーキが掛かります。上に押し上げると前キャストの旋回が固定しますので直進の際に便利です。足踏みブレーキ部が中央にある場合は解除された状態になります。



## ⚠ 注意

ブレーキを掛けたまま無理にストレッチャーを動かさないでください。無理に動かすと故障の原因になります。

ブレーキは靴を履いた足で踏み込んで操作してください。過度に踏みつけたり、金槌等で叩くと制動部品の変形の原因になりますので行わないでください。

高温室・冷凍室・スチーム室などの特別な環境や酸・アルカリなど腐食性の強い環境、極端な油・水周りでの使用は変形・強度低下・破損の原因になりますので避けてください。

## 3.仕 様

品名・名称	標準仕様・規格
	KM-SR1
高 さ (mm)	530 ~ 860
長 さ (mm)	1,900
全 幅 (mm)	650
重量 (Kg)	6.9
肘掛け高さ (mm)	240
材 質 フレーム	スチール
担架部	アルミ合金 表面：ウレタン入りビニールレザー
マットレス	ポリエステル
サイドレール	アルミ合金
キャスト	スチール 150mm ストッパー付
付属品	ガートル棒（取付穴上下2箇所） 酸素ボンベ架（内径105mm） ベッド連結ベルト（4本） 移乗マット スライドボード フレーム下部カゴ 固定用ベルト

## 4.保 証

### 保証書

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送ください。

保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5 年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

### 保証期間後

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### 保証の適用除外となる場合

- ( a ) ご使用による消耗品および取扱不注意による破損  
例) タイヤの磨耗およびパンク、シートの破損等
- ( b ) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
- ( c ) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- ( d ) 保全上の不備および弊社の特約販売店以外で行った修理や改造等による破損
- ( e ) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用で発生した破損

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置  
しないで各自治体の取り決めにしたがってください。



本社	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 - 9 - 1	TEL078-969-2800
本店サービスセンター	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 - 9 - 1	TEL078-969-2820
東京サービスセンター	〒110-0013 東京都台東区入谷 1 - 8 - 3	TEL03-3874-3511
横浜サービスセンター	〒220-0073 横浜市西区岡野 2 - 12 - 9	TEL045-290-9585
名古屋サービスセンター	〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 - 3 - 11	TEL0568-52-4800
大阪サービスセンター	〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2 - 20 - 10	TEL06-6190-8488
福岡サービスセンター	〒819-0055 福岡市西区生の松原 1 - 18 - 3	TEL092-882-4722
神戸工場	神戸第二工場	いなみの工場
メンテナンスセンター		

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。